

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Podpórka czterokołowa aluminiowa

Kod produktu: TGR-R RA 882




### 1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej powlekanej farbą z metalicznym połyskiem. Posiada szerokie tapicerowane siedzisko, miękkie oparcie i zdejmowany koszyk. Wyposażona w regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz hamulce z zaciskiem postojowym. Posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8". Zestaw zawiera: dwa uchwyty z hamulcami, ramę podpórki wraz z siedziskiem, oparcie, koszyk, śrubę blokującą - 2 szt.

#### Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. śruba blokująca
- d. linki hamulców
- e. oparcie
- f. sztyft blokujący
- g. belka poprzeczna
- h. zawias belki poprzecznej
- i. taśma składania ramy
- j. koszyk
- k. górna regulacja hamulca
- l. dolna regulacja hamulca
- m. uchwyt na kule

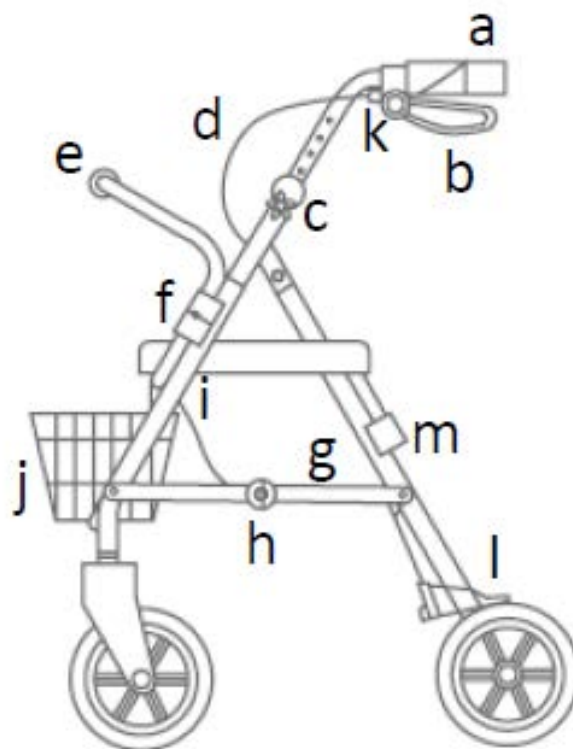

### 2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób

starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

### **3. Montaż**

#### **Rozłożenie i złożenie podpórki**

- Aby rozłożyć podpórkę należy docisnąć belkę poprzeczną znajdującą się pod siedziskiem do momentu, aż zawiasy będą całkowicie rozłożone. Następnie zamontować uchwyty w otworach montażowych na odpowiedniej wysokości dokręcając śruby blokujące, linki hamulców powinny znajdować się z przodu podpórki. Siedzisko należy oprzeć na rozłożonej ramie.
- Następnie zamontować oparcie w otworach montażowych z przodu podpórki do momentu zablokowania sztyftów.
- Koszyk można zawiesić na ramie podpórki z przodu lub pod siedziskiem.
- Należy zdjąć plastikowe ochraniacze z kół.
- Aby złożyć podpórkę do transportu należy opuścić siedzisko, a następnie pociągnąć do góry taśmę łączącą belkę poprzeczną z ramą, aż do momentu całkowitego złożenia ramy.

#### **Funkcja hamulców**

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwyty, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

#### **Regulacja wysokości uchwytów**

Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śruby blokujące znajdujące się na zewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki i ponownie dokręcić śruby blokujące. **Uwaga!** Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

## Regulacja hamulców

**Górna regulacja hamulca:** należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej. **Dolna regulacja hamulca:** należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki następnie dokręcić śrubę mocującą.

## 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	60 cm
Głębokość całkowita	66 cm
Wymiary siedziska	35 cm x 32 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Regulacja wysokości uchwytów	77-88 cm
Waga	8,2 kg
Max obciążenie	110 kg
Max obciążenie koszyka	5 kg
Kolor ramy	bordowy, niebieski, grafitowy

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja










Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

## 7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką

otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  
Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)  
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021