

Instrukcja obsługi

Podpórka ułatwiająca chodzenie typu AMBONA

Kod produktu TGR-R RS 8812




1. Wykonanie

Podpórka ułatwiająca chodzenie czterokołowa, wykonana jest ze stalowej chromowanej ramy. Wyposażona w piankowe uchwyty, uchwyt na kroplówkę, tapicerowane podparcie pod łokcie z możliwością płynnej regulacji wysokości, zdejmowane siedzisko oraz obrotowe koła z blokadą. Zestaw zawiera: ramę podpórki wraz z kołami, ramę stabilizującą górną, ramę stabilizującą dolną, podparcie pod łokcie, siedzisko, klipsy blokujące- 4 szt., śruby blokujące motylkowe – 2 szt.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. podparcie pod łokcie
- c. klips blokujący
- d. rama stabilizująca górną
- e. rama stabilizująca dolną
- f. śruba montażowa motylkowa
- g. siedzisko
- h. uchwyt na kroplówkę
- i. hamulec

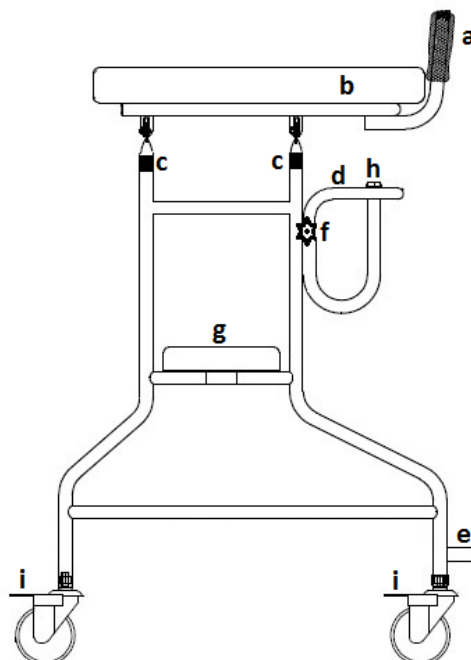

2. Zastosowanie

Podpórka ułatwiająca chodzenie jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas pionizacji oraz chodzenia. Podpórka przeznaczona jest dla pacjentów o różnym typie zaburzeń motorycznych z ograniczoną ruchomością i dysfunkcją kończyn dolnych lub ich osłabieniem. Zalecana jest

również osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż

Rozłożenie podpórki

- Ramę podpórki należy postawić na podłożu tak, aby rama stabilizująca dolna była od zewnątrz. Następnie należy zamontować ramę stabilizującą górną w otworach montażowych w części przedniej ramy i dokręcić ją śrubami montażowymi.
- Następnie należy zamontować podparcie pod łokcie w otworach montażowych ramy podpórki i zablokować klipsami blokującymi na odpowiedniej wysokości.
- Siedzisko służy do chwilowego spoczynku i należy go zamontować na dolnej części ramy. W przypadku poruszania się z podpórką siedzisko należy zawiesić w części zewnętrznej ramy podpórki.
- W przypadku korzystania z kroplówki, należy zamontować ją w otworze montażowym w przedniej części ramy podpórki.

Funkcja hamulców

Uwaga! Podczas korzystania z siedziska należy bezwzględnie zablokować wszystkie hamulce.

Regulacja wysokości podparcia pod łokcie

Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i łokciami opartymi na podparciach. Niewskazane jest zawieszanie

się na podpórce całym ciężarem ciała. Aby wyregulować wysokość podparcia pod łokcie, należy wyciągnąć klips blokujący znajdujący się na zewnętrznej stronie ramy, następnie wybrać odpowiednią wysokość i ponownie zamontować klips blokujący.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	63 cm
Głębokość całkowita	76 cm
Wymiary siedziska	56 cm x 20 cm
Wysokość siedziska od podłoża	54 cm
Regulacja wysokości podparcia pod łokcie	101-124 cm
Waga	10,8 kg
Max obciążenie	100 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja










- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy

jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021